


Artus™

cervical plate system



System

- Material: Titanlegierung
- Farbcodierte Schrauben beinhalten die Durchmesser von 4,0 mm und 4,5 mm und sind in den Längen 12 mm bis 18 mm verfügbar
- Ø 4 mm Schrauben sind in selbstbohrender und selbstbohrender/-schneidender Variante verfügbar
- Ø 4,5 mm Schrauben sind in selbstschneidender Variante verfügbar
- Standard-Platten: 2 mm Dicke in der Biegezone (Taille), 16,5 mm Breite, verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-Level (12 mm bis 84 mm)
- 1- und 2-Level-Medial-Platten (12 mm bis 46 mm)
- Platten verfügen über einen Verriegelungsmechanismus, um eine Lockerung der Schrauben zu verhindern
- Implantate steril verfügbar

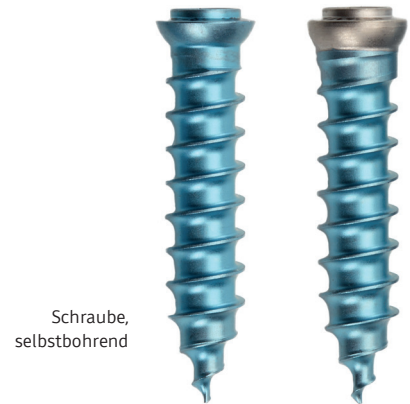

Schraubenlänge	Winkelstabil		Variabel
	Schaft	Kopf	Schaft & Kopf
12 mm	Dunkelblau	Grau	Dunkelblau
14 mm	Magenta	Grau	Magenta
16 mm	Gold	Grau	Gold
18 mm	Hellblau	Grau	Hellblau






Vorteile


- Verwendung von nur einem Schraubendreher für das Eindrehen der Schrauben und den Verriegelungsmechanismus
- Variable Schrauben: maximaler Winkel von $\pm 10^\circ$ relativ zum Schraubenloch der Platte
- Die Artus-Platten sind lordotisch vorgebogen
- Verschiedene Schraubentypen, Längen und Durchmesser verfügbar




Standard Platte, 1-Level

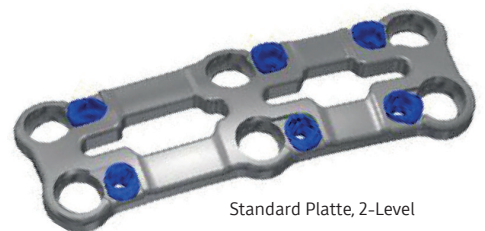

Standard Platte, 2-Level

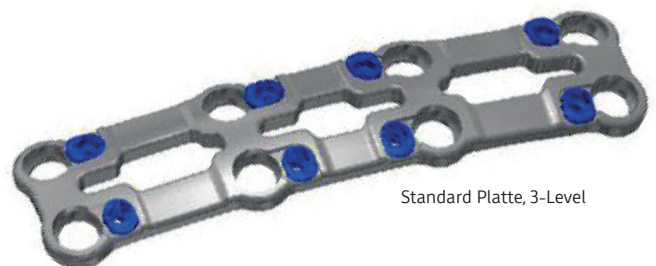

Standard Platte, 3-Level

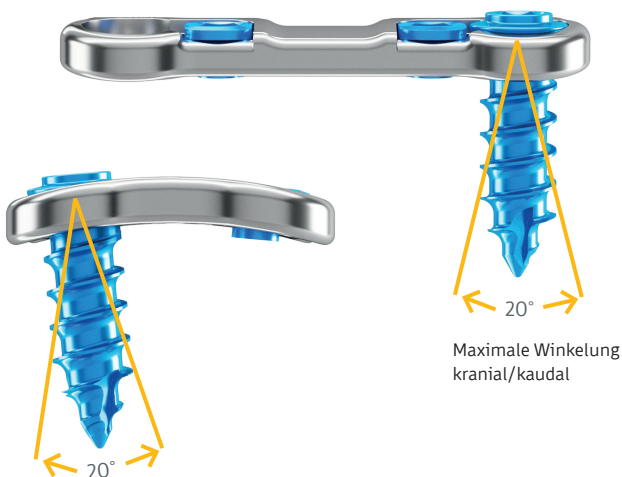

Maximale Winkelung
kranial/kaudal

Maximale Winkelung lateral/medial

Komponenten

Implantate	Art.-Nr.
Standard Platte, 1-Level, Länge 12 mm - 26 mm	CS 9102-01-12-S, -14-S, -16-S, -18-S, -20-S, -22-S, -24-S, -26-S
Standard Platte, 2-Level, Länge 24 mm - 46 mm	CS 9102-02-24-S, -26-S, -28-S, -30-S, -32-S, -34-S, -37-S, -40-S, -43-S, -46-S
Standard Platte, 3-Level, Länge 39 mm - 69 mm	CS 9102-03-39-S, -42-S, -45-S, -48-S, -51-S, -54-S, -57-S, -60-S, -63-S, -66-S, -69-S
Schraube, selbstbohrend, winkelstabil, Ø 4 mm, Länge 12 mm - 18 mm	CS 9140-40-12-S, -14-S, -16-S, -18-S
Revisionsschraube, selbstschneidend, winkelstabil, Ø 4,5 mm, Länge 12 mm - 18 mm	CS 9142-45-12-S, -14-S, -16-S, -18-S
Schraube, selbstbohrend, variabel, Ø 4 mm, Länge 12 mm - 18 mm	CS 9150-40-12-S, -14-S, -16-S, -18-S
Revisionsschraube, selbstschneidend, variabel, Ø 4,5 mm, Länge 12 mm - 18 mm	CS 9152-45-12-S, -14-S, -16-S, -18-S
Optional	
Mediale Platte, 1-Level, Länge 12 mm - 26 mm	CS 9101-01-12-S, -14-S, -16-S, -18-S, -20-S, -22-S, -24-S, -26-S
Mediale Platte, 2-Level, Länge 24 mm - 46 mm	CS 9101-02-24-S, -26-S, -28-S, -30-S, -32-S, -34-S, -37-S, -40-S, -43-S, -46-S
Standard Platte, 4-Level, Länge 60 mm - 84 mm	CS 9102-04-60-S, -64-S, -68-S, -72-S, -76-S, -80-S, -84-S
Schraube, selbstschneidend, winkelstabil, Ø 4 mm, Länge 12 mm - 18 mm	CS 9141-40-12-S, -14-S, -16-S, -18-S
Schraube, selbstbohrend/-schneidend, winkelstabil, Ø 4 mm, Länge 12 mm - 18 mm	CS 9144-40-12-S, -14-S, -16-S, -18-S
Schraube, selbstschneidend, variabel, Ø 4 mm, Länge 12 mm - 18 mm	CS 9151-40-12-S, -14-S, -16-S, -18-S
Schraube, selbstbohrend/-schneidend, variabel, Ø 4 mm, Länge 12 mm - 18 mm	CS 9154-40-12-S, -14-S, -16-S, -18-S